



不一樣的玻尿酸!!



完美配方 + 專利技術 = 新一代的玻尿酸

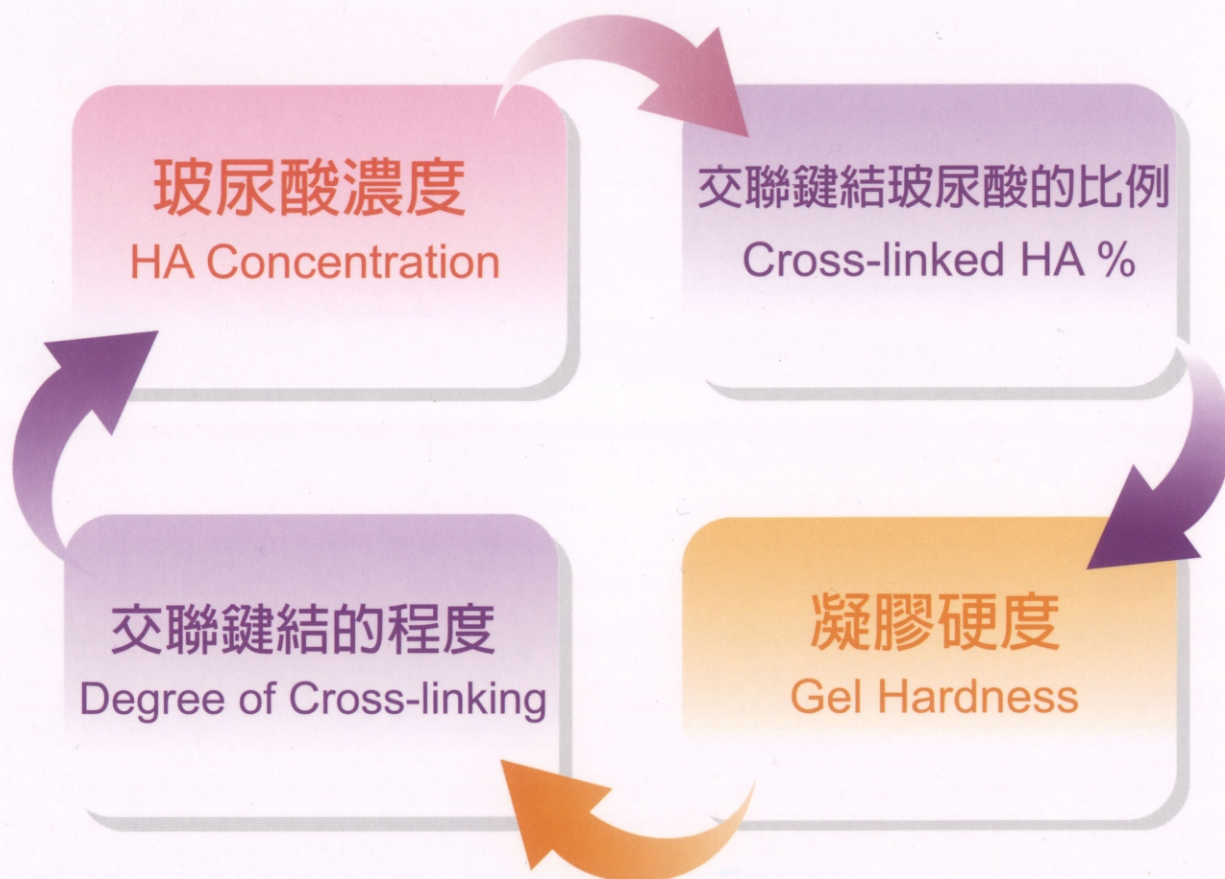

喬雅登®
Juvéderm®

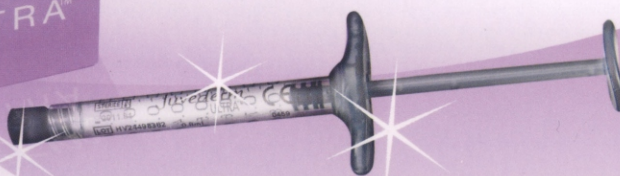

每支 JUVÉDERM® ULTRA 0.8mL 比Restylane® 1.0mL 多出 8% 交聯鍵結玻尿酸

HYLACROSS® 專利科技能製造出高濃度的交聯鍵結玻尿酸

	JUVÉDERM® ULTRA	Restylane®
HA concentration 玻尿酸濃度	24 mg/mL	20 mg/mL
— 總體玻尿酸濃度 (包含交聯鍵結與無交聯鍵結玻尿酸)		
Uncross-linked HA 無交聯鍵結玻尿酸	~10%	~20%
— 提升注射時的潤滑度, 半衰期約12-24小時 — 高親水性, 且被認為會造成注射後水腫的發生		
Cross-linked HA 交聯鍵結玻尿酸	~90%	~80%
— 維持美容治療效果持久的主要成份		
Gel hardness (G' @ 1.6 Hz) 凝膠硬度	150-200 Pa	500-600 Pa
— 除了交聯鍵結與濃度的因素之外, 就硬度而言 JUVÉDERM® 柔順的凝膠特性能在注射時順暢地注入皮膚		
Cross-linked HA concentration 交聯鍵結玻尿酸的濃度/mL	~21.6 mg/mL	16 mg/mL
— 每 mL 的 JUVÉDERM® ULTRA 比 Restylane® 多出 35% 的 cross-linked HA		
Syringe fill 容量	0.8 mL	1.0 mL
Cross-linked HA concentration per syringe 交聯鍵結玻尿酸的濃度/syringe	17.28 mg/syringe	16 mg/syringe
— 每支 JUVÉDERM® ULTRA 0.8mL 比 Restylane® 1.0mL 多出 8% 的 cross-linked HA		

完美配方 + 專利技術 = 新一代的玻尿酸

